

miyasuku Game
インストール手順

※google Chrome を使用しています。

※バージョンアップの場合は、インストールの前に miyasuku Game を終了してください。

1.miyasuku ホームページの「miyasuku Game のご紹介」の「ダウンロード」ボタンを押してください。

【miyasuku Gameのご紹介】

【本製品の概要】



miyasuku Gameは、市販のゲームを視線で操作して遊ぶためのアプリケーションです。

HDMIキャプチャー機器を使用して、ゲームの画像と音をパソコンで再生し、パソコンの画面に表示したコントローラーのボタンを見て操作します。付属のゲームパッドメーカーで、ゲームに応じた独自のボタン配置を設定できます。また、1つのボタンに、コントローラーの複数ボタン同時操作や連続操作を設定することもできます。

miyasuku スイッチボックス（別売）とスイッチ（別売）を使用すれば、視線+スイッチで操作することもできます。

視線検出装置TM5-mini（別売）を使用すれば、ゲームで遊んでいる時の視線の動きを記録し、miyasuku EyeConRC（別売）で記録結果を確認することができます。

【製品のダウンロード】

miyasuku Gameバージョン1.0.0.0を

 [ダウンロード](#)

インストールの手順は、[こちら](#)をご確認ください。

※14日間は体験版として無料でお使い頂けます。

- マイページ
- 新着情報
- 開発の目的
- 製品のご紹介
- 料金体系
- 「miyasuku」とは！

Unicorn
UNIVERSAL COMPUTER NETWORKS

本サイトに掲載中のソフトウェアは、株式会社ユニコーンが開発しております。


Secured by **CPI**

当サイトではお客様の情報を扱う通信において、CPIブランドのSSLを使用しております。

2.ダウンロードが終わるまでしばらくお待ちください。


3.ダウンロードが終わったら、「^」の部分をクリックしてください。

miyasuku Gameバージョン1.0.0.0を  [ダウンロード](#)

インストールの手順は、[こちら](#)をご確認ください。
※14日間は体験版として無料でお使い頂けます。


 miyasukuGame1.0.....zip 

4.表示されたメニューの「フォルダを開く」を選択してください。

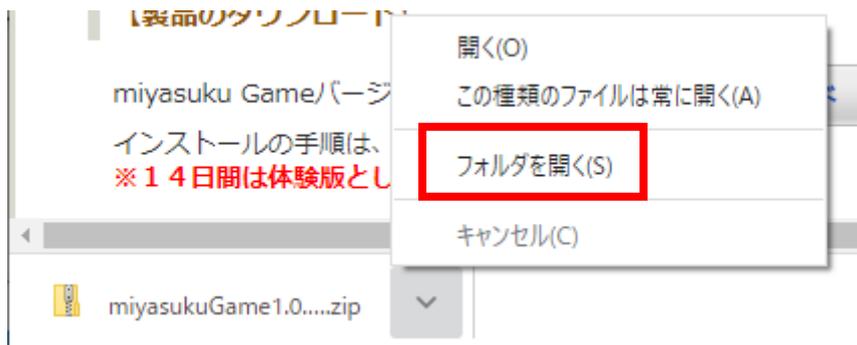


5. 「miyasukuGame*.*.*.zip」ファイルを選択してください。


※*はバージョンを表す数字になります。

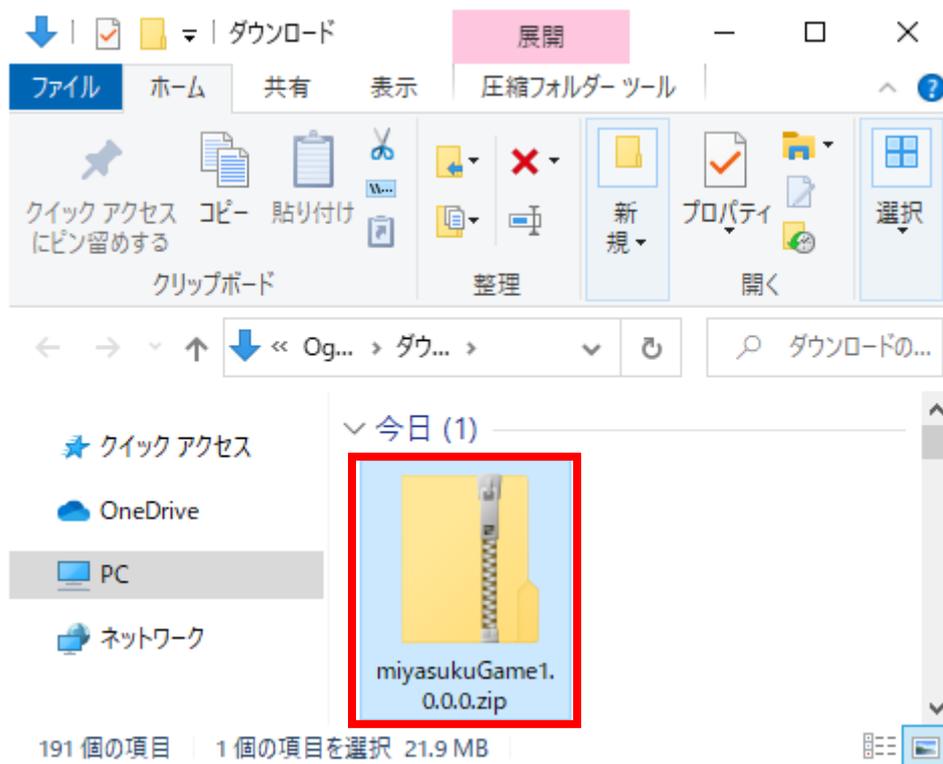

6.画面上部の「圧縮フォルダーツール」をクリックしてください。

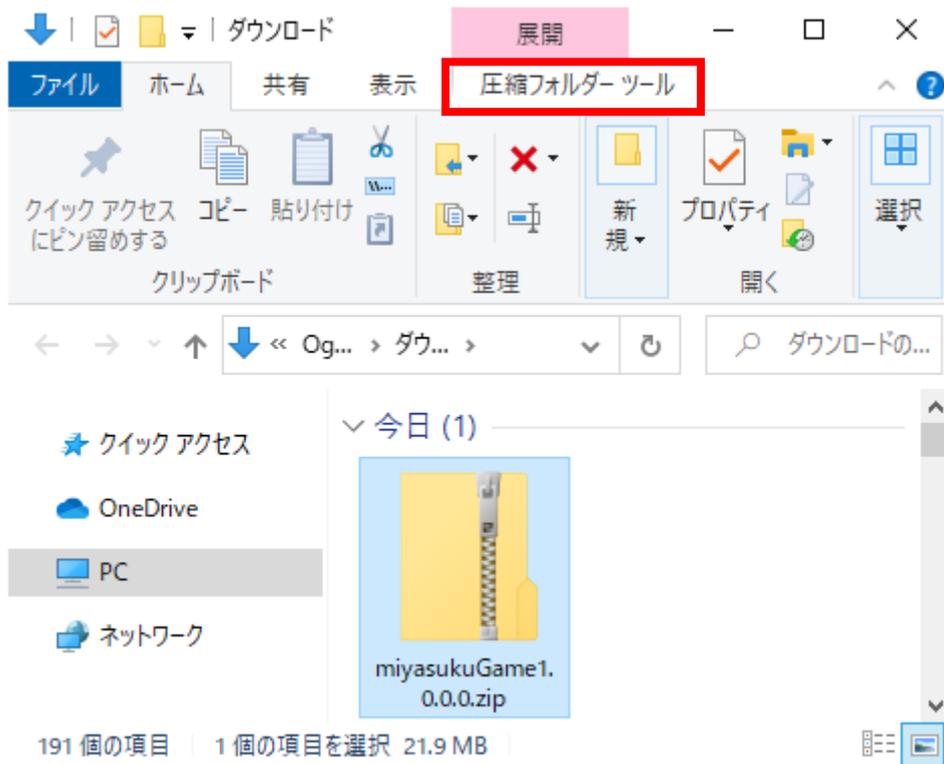

7.「すべて展開」をクリックしてください。

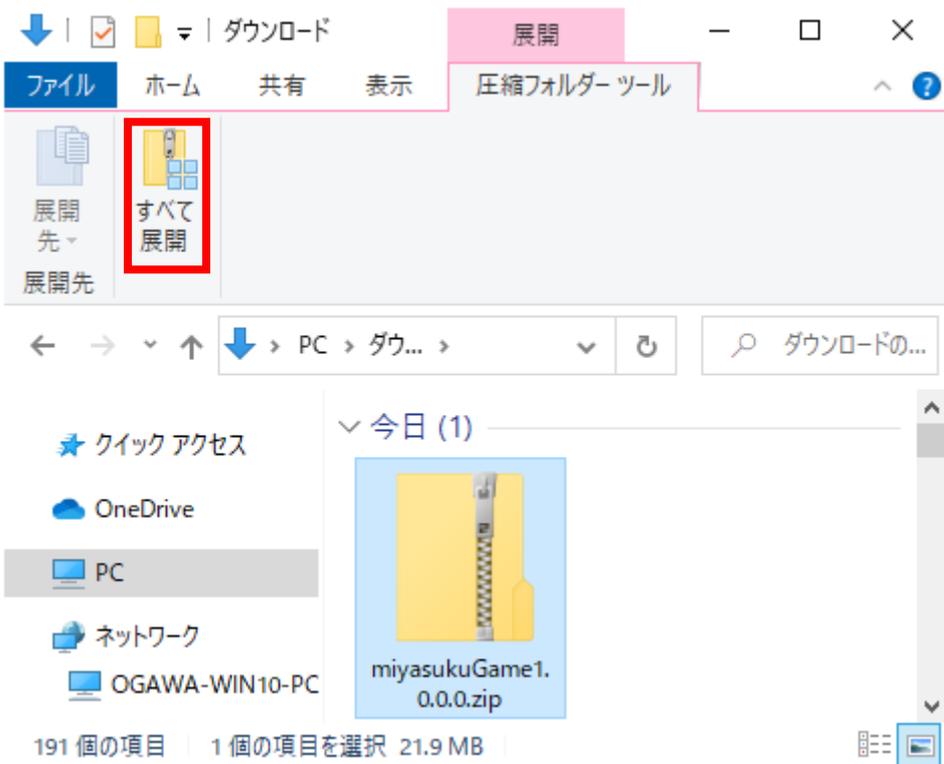

8. 「完了時に展開されたファイルを表示する」をチェックし、「展開」ボタンを押してください。

×

← 圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開

展開先の選択とファイルの展開

ファイルを下のフォルダに展開する(E):

C:\Users\Ogawa\Downloads\miyasukuGame1.0.0.0

参照(R)...


完了時に展開されたファイルを表示する(H)

展開(E)


キャンセル

9. 「miyasukuGame*.*.*.*」フォルダを開いてください。


※*はバージョンを表す数字になります。

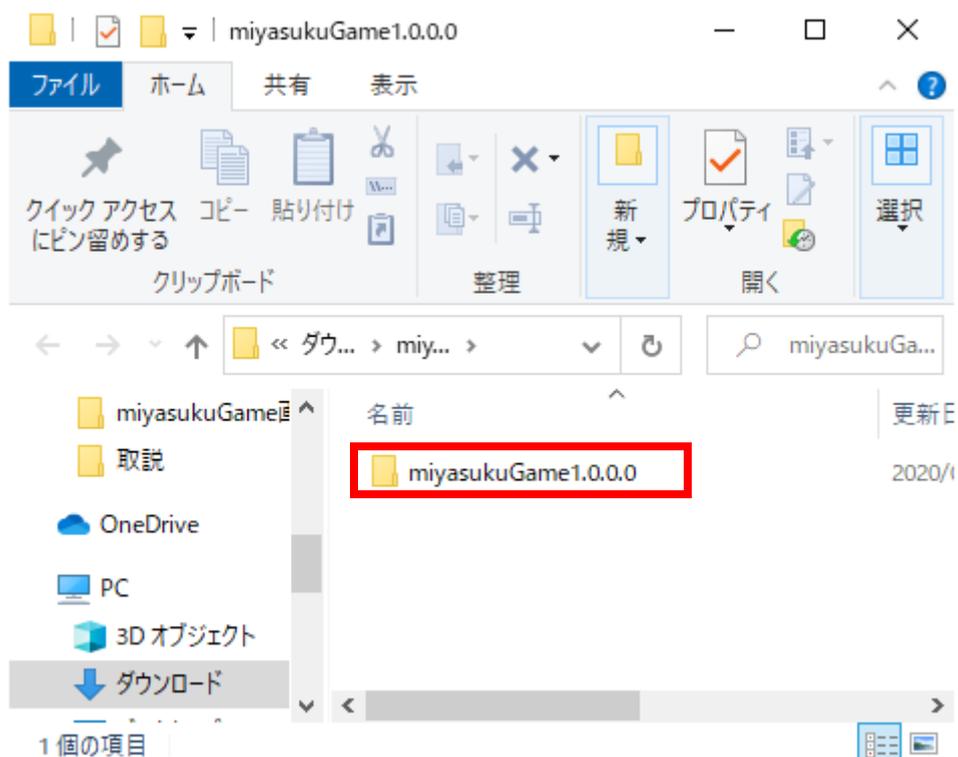

10. 「install」または「install.bat」ファイルを起動してください。

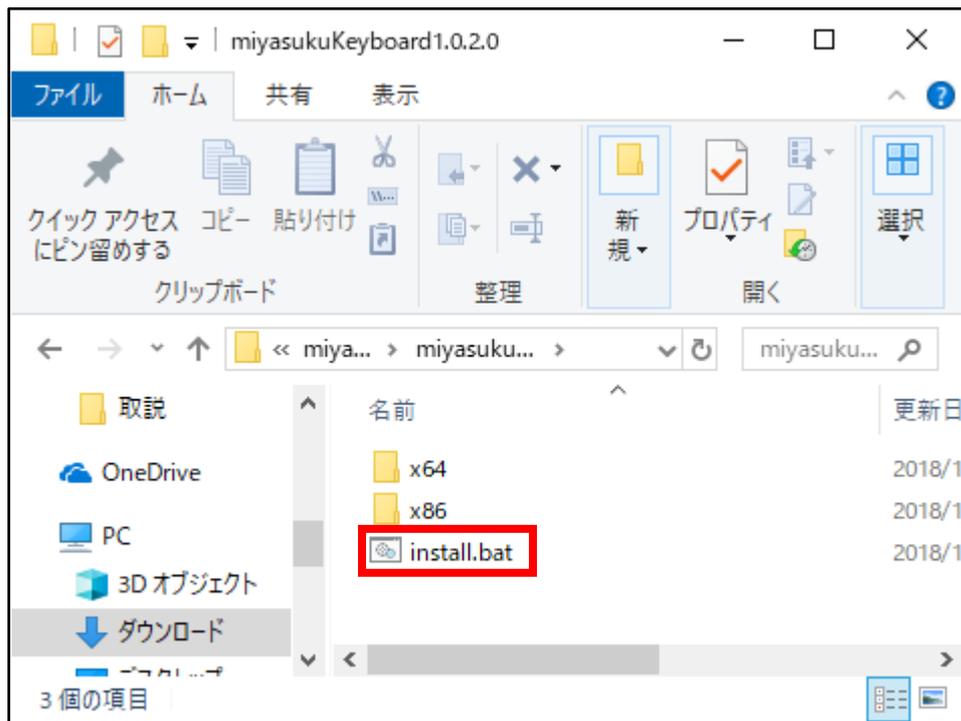


11.以下の画面が表示されたら「詳細情報」をクリックしてください。

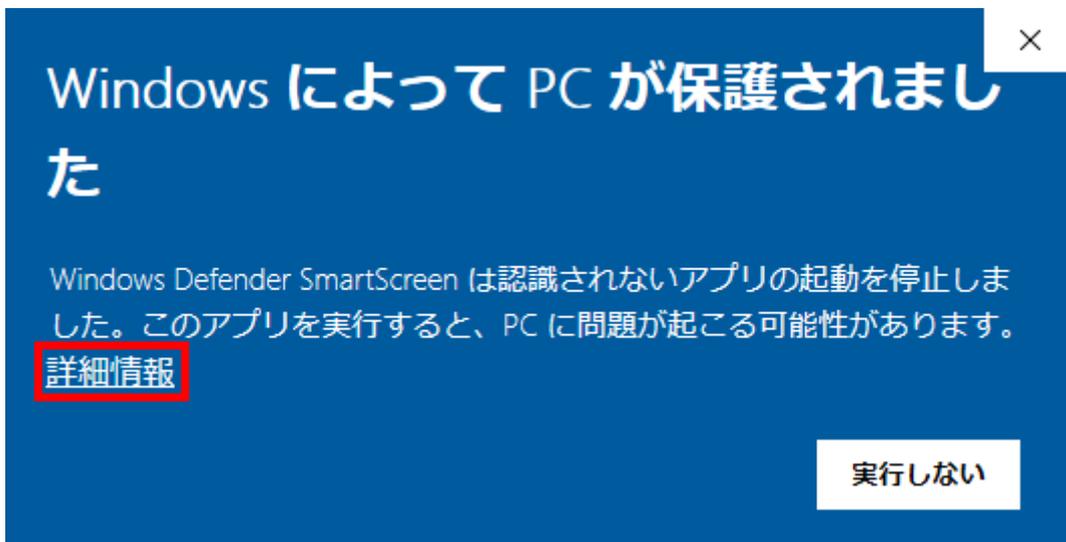


12. 「実行」 ボタンをクリックしてください。



13.以下の画面が表示されたら、キーボードのキーを何か押してください。

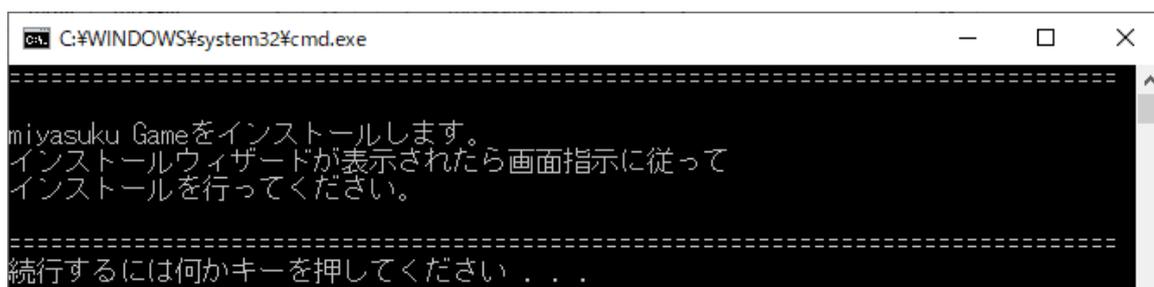

14.以下の画面が表示されたら「詳細情報」をクリックしてください。

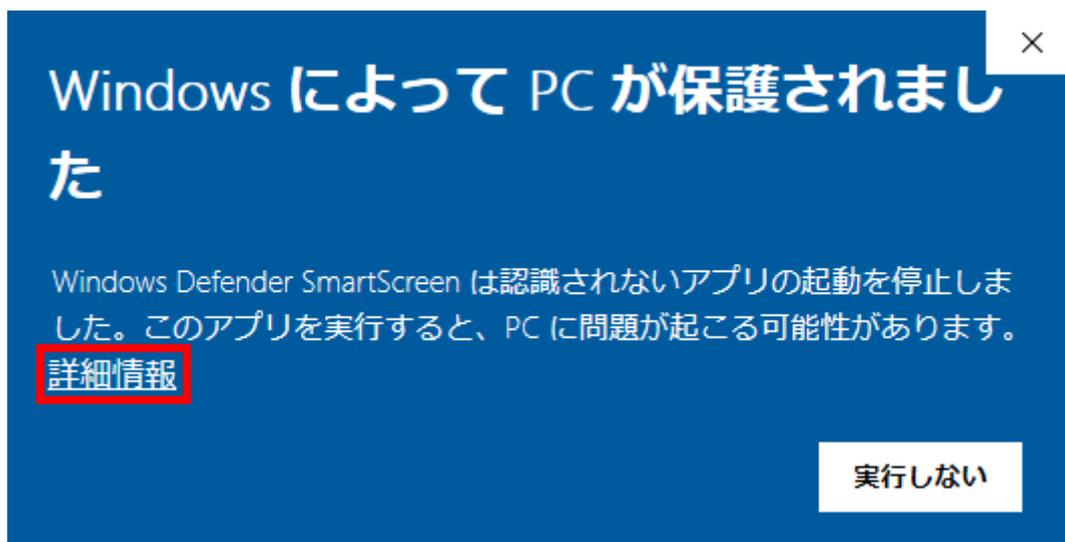


15. 「実行」 ボタンをクリックしてください。




16. インストーラが起動するので、「次へ」 ボタンをクリックしてください。




17. 「使用許諾契約書に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

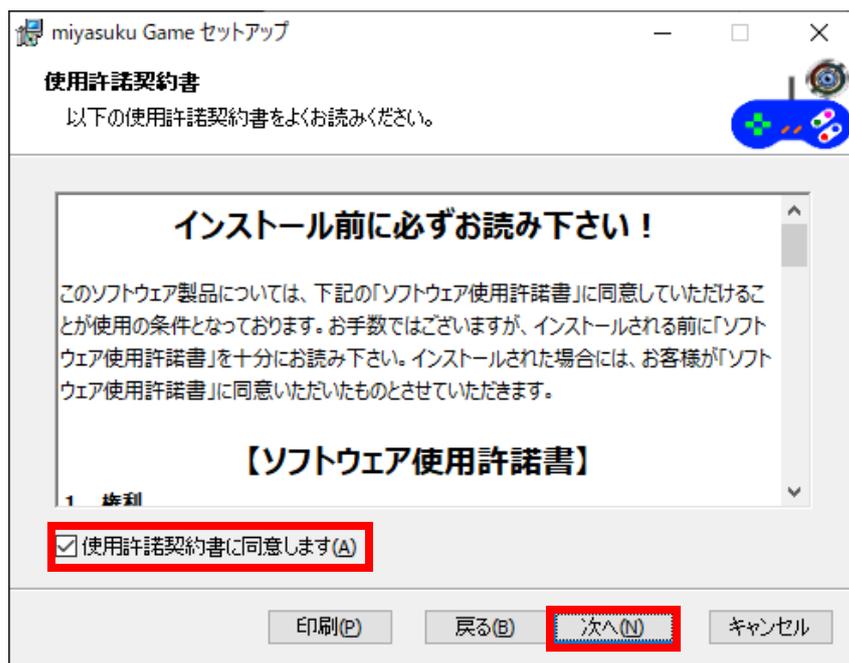

18. 「次へ」ボタンをクリックしてください。

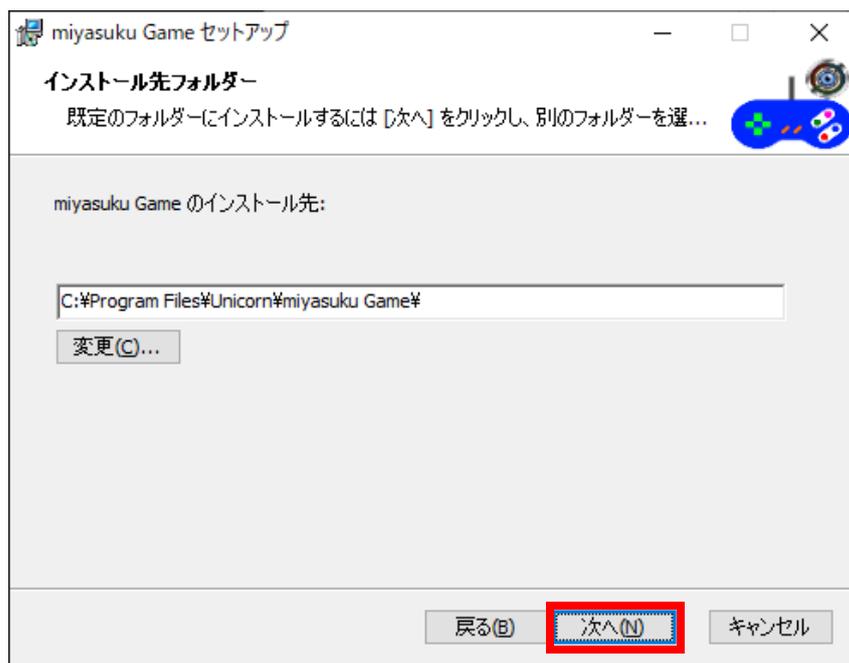

19. 「インストール」 ボタンをクリックしてください。

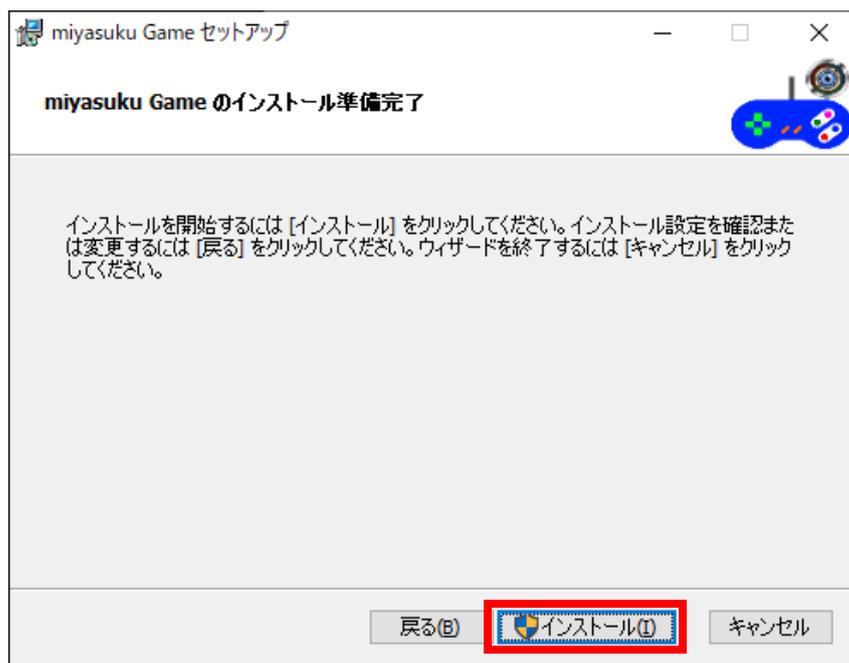


20. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」ボタンをクリックしてください。


※この画面は Windows8 の画面です。



21.インストールが終わるまで、しばらくお待ちください。

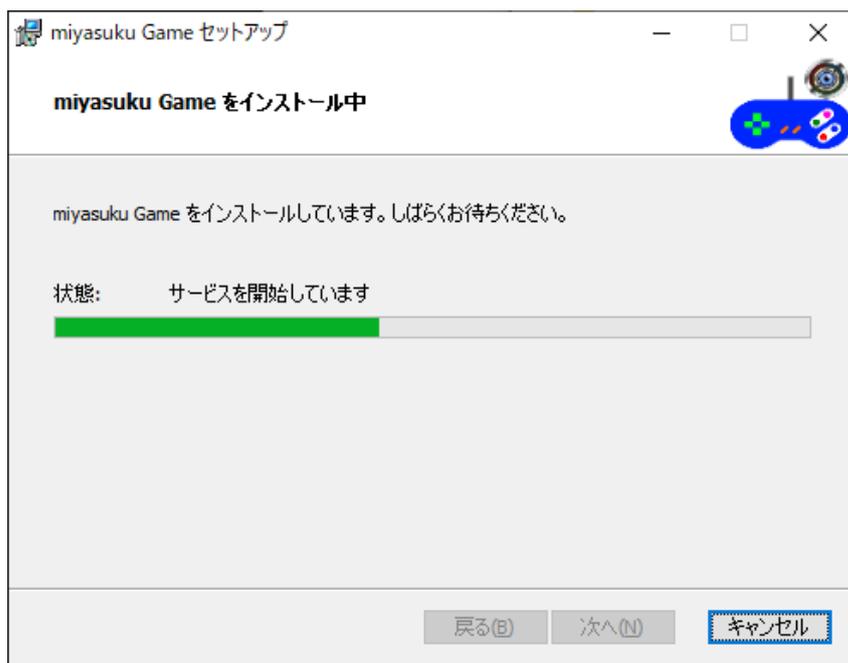

22.14日間無料使用のメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリックしてください。

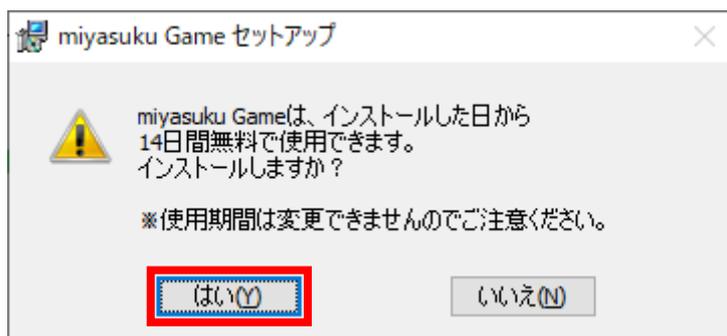

23.インストールが終わったら、「完了」ボタンをクリックしてください。

